

SLIM UP TOP CENTER®



SLIM UP TOP CENTER® 2.0

SAUNA
ITALIA®

SLIM UP® DRAIN

Apparecchio per il drenaggio ed il pressomassaggio.
3 sezioni: arti inferiori, arti superiori, testa-viso.
Gestito dalla TOP CARD.
Utilizzabile anche manualmente.


*Unit for drainage and pressomassage.
3 sections: lower limbs, upper limbs, head and face.
Controlled by the TOP CARD. It may also be used manually.*

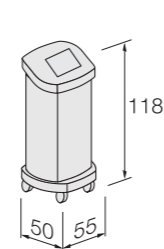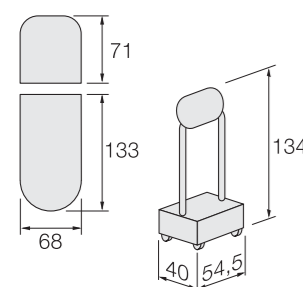

SLIM UP® ThermoBalance

Apparecchio per trattamenti alternati di riscaldamento e raffreddamento.
4 programmi gestiti dalla TOP CARD.
Utilizzabile anche manualmente.

*Unit for body treatment based on successive steps of heating and cooling
4 programs controlled by the TOP CARD.
It can be also manually set.*

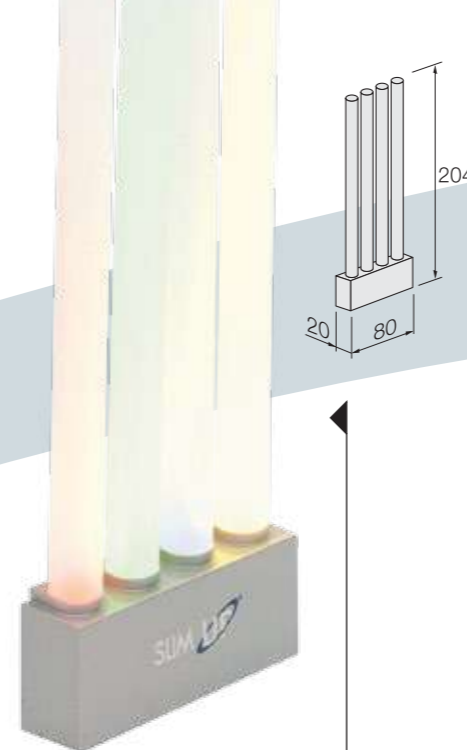

SLIM UP® LIGHTER

Luci e colori in ambiente.
Lights and colours in your room.

SLIM UP® TOP CENTER® 2.0 è il centro estetico che utilizza il metodo e l'insieme degli strumenti Slim UP per il benessere e la cura del corpo (snellimento, tonificazione, modellamento, trattamento del sovrappeso, trattamento multifattoriale della cellulite), completo anche di tecnologie per trattamenti viso (rassodamento, drenaggio, ecc...)
Il personale sarà fortemente addestrato sia sul piano tecnico che su quello commerciale. I nostri medici e le nostre insegnanti terranno gli opportuni corsi di formazione.

SLIM UP® STATION

Rileva i dati, li memorizza automaticamente, li analizza e indica i trattamenti.
Genera la TOP CARD.
Si connette col dietologo.

*It acquires data, stores them automatically, analyses them and indicates which treatment to perform.
It generates the TOP CARD.
It gets you in touch with the dietician.*



Le nostre tecniche saranno di supporto per l'istruzione pratica negli Slim UP TOP CENTER® 2.0.
Slim UP TOP CENTER® 2.0 è identificato da INSEGNA e le cabine dei trattamenti da TARGA. Saranno disponibili manifesti, cartelli da banco e folder.

*The beauty parlour uses the method and the tools of the Slim UP TOP CENTER® 2.0 for the well-being and care of the body (slimming, toning, shaping, excess weight treatment, multi-factor treatment of cellulite), together with technologies for face treatment (firming, draining etc.)
Personnel will have to be substantially trained both on technical and on sale aspects.*


*Our doctors and instructors will hold the necessary training courses.
Our techniques will complement the practical training in the Slim UP TOP CENTER® 2.0 sections.*

*The Slim UP TOP CENTER® 2.0 is identified by a SIGN and the treatment cabins by a PLATE.
Posters, counter display cards and folders will be available.*

SLIM UP® TOP CARD

Identifica il cliente, memorizza il ciclo dei trattamenti, seleziona ed attiva i programmi sulle singole macchine, rileva il numero ed il tipo di trattamenti effettuati e da effettuare.
Lettura a transponder.



*It identifies the customer, stores the treatment cycle, selects and activates the programs on the single machines, detects the number and the type of past and future treatments.
Data uploading by transponder.*

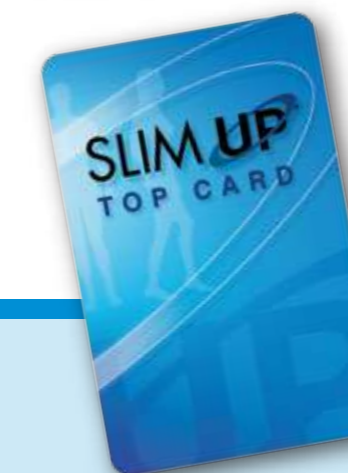

SLIM UP® ULTRA

Apparecchio per il trattamento di infrarossi con elettrostimolazione e ultrasuoni.
7 programmi gestiti dalla TOP CARD.
Utilizzabile anche manualmente.


*Unit for infrared treatment with electro-stimulation and ultrasounds.
7 programmes controlled by the TOP CARD.
It may also be used manually.*

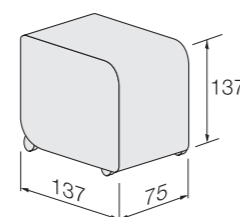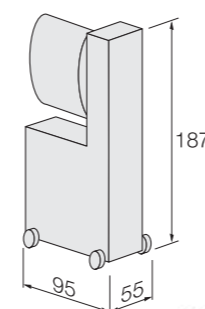

SLIM UP® STEAM

Apparecchio per trattamenti di calore, vapore, aromaterapia.
5 programmi gestiti dalla TOP CARD. Utilizzabile anche manualmente.
In alternativa, può essere presente Slim UP BigSteam, con caratteristiche analoghe.

*Unit for treatment by heat, steam and aromatherapy.
5 programmes controlled by the TOP CARD. It may also be used manually.
It can be replaced by Slim UP BigSteam, a unit with the same features.*

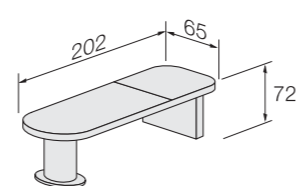

SLIM UP® COUCH

Lettino per trattamenti.
Couch for the treatments.

SLIM UP® TOP CENTER® 2.0



SLIM UP® ULTRA

Settore infrarosso

- Effetto riducente sul grasso, dimagrante, positivo su sovrappeso ed obesità, attraverso l'aumento del metabolismo locale, grazie al calore che l'infrarosso riesce a far penetrare in profondità meglio di altre metodiche
- Effetto linfodrenante, attraverso l'aumento della velocità di ritorno linfatico
- Effetto positivo o riducente sugli inestetismi della cellulite, attraverso l'aumento sia del microcircolo superficiale e la migliore ossigenazione, sia del drenaggio linfatico e del metabolismo adiposo
- Miglior assorbimento di prodotti cosmetici per aumento della microcircolazione e per riduzione della barriera elettrica cutanea
- Effetto positivo sul trofismo cutaneo o sullo stato di nutrizione cutanea o sui meccanismi di riparazione cutanea, grazie alla miglior ossigenazione, al miglior drenaggio e detossificazione, allo stimolo ad una maggiore riproduzione cellulare
- Effetto rilassante ed antidepressivo per aumento della produzione di mediatori chimici
- Effetto antalgico o antidolorifico per miglior drenaggio, migliore ossigenazione e decontrattura muscolare
- Effetto rilassante muscolare o decontratturante con potenziamento degli effetti dell'elettrostimolazione

Settore ultrasuoni

- Massimizzazione dell'effetto lipolitico degli infrarossi grazie all'ulteriore aumento della temperatura locale per l'effetto "cavitativo" sulle microbolle d'acqua e permeabilizzante sulla membrana delle cellule adipose
- Effetto fibrolitico mirato alla riduzione degli inestetismi della cellulite avanzata e degli accumuli localizzati fibro-adiposi
- Azione capillarizzante, ossigenante e detossificante
- Funzione antidolorifica e miorelissante
- Facilitazione dell'assorbimento di prodotti cosmetici attraverso l'epidermide
- Attivazione dei fibroblasti, importanti nella rigenerazione tissutale e nel tono cutaneo

Settore elettrostimolazione

- Rassodamento o tonificazione della muscolatura attraverso l'attività eccitomotora involontaria o indotta o passiva
- Modellamento della forma corporea per riequilibrio delle proporzioni
- Effetto riducente sul grasso per azione lipolitica diretta della corrente
- Rassodamento cutaneo e sottocutaneo, o effetto sulla perdita di tono cutaneo e sottocutaneo per stimolazione anche dei fasci muscolari più sottili non attivabili volontariamente
- Effetto drenante venoso per effetto pompa della contrazione muscolare
- Effetto antalgico o antidolorifico

Infrared section

- *Fat reducing, lipolytic, slimming effect, i.e. effective against overweight and obesity, due to an increasing in local metabolism. This process takes place thanks to the deep penetration of the heat which is induced through infrared rays better than other methods*
- *Lymphatic drainage effect, thanks to the faster speed of lymphatic return*
- *Cellulite blemishes reducing effect, thanks to the improved shallow micro-circulation, leading to a better local oxygenation, and to the increased lymphatic drainage and fat metabolism*
- *Better absorption of cosmetic products due to an increased micro-circulation and to the reduction of the skin electrical barrier*
- *Beneficial effect on skin trophism, i.e. on the nutrition condition of the skin and on its repair mechanisms, thanks to a better oxygenation, an improved drainage and detoxification and the stimulation of an increased reproduction of cells*
- *Relaxing and antidepressant effect thanks to the boosted production of neurohumours*
- *Analgesic and pain-relieving effect due to a better drainage, an improved oxygenation and muscle relaxation*
- *Muscle relaxation and soothing effect with boosted electro-stimulation effects*

Ultrasound section

- *Great increase of the infrared lipolytic effect: this further heating of tissues is due to the "cavitation" effect against the liquid micro-bubbles and to the "permeabilising" effect on the fat cells membrane*
- *Fibrolitic effect for the reduction of advanced cellulite imperfections and accumulation of localised fibroadiposity*
- *Capillarizing, oxygenating and detoxifying action*
- *Analgesic (pain relief) and myorelaxant action*
- *Advanced absorption of cosmetic products through the skin*
- *Fibroblasts activation, important in tissue regeneration and skin tone*

Electrostimulation section

- *Firming or toning of muscles thanks to either involuntary or induced or passive excito-motory activity*
- *Shaping of the body thanks to the readjustment of proportions*
- *Fat reducing effect due to the direct lipolytic action of electrical current*
- *Skin and under-skin firming, i.e. effect on the loss of skin and under-skin tone due to stimulation of even the thinnest muscular fasciae which cannot normally be voluntarily activated*
- *Venous draining effect due to pumping action on muscular contraction*
- *Analgesic and pain-killing effect*

SLIM UP® STEAM / SLIM UP® Big Steam

Calore

- Effetto lipolitico o liporiducente o positivo sul sovrappeso ed obesità in quanto stimolante il metabolismo locale grazie al calore che l'infrarosso riesce a far penetrare in profondità meglio di altre metodiche
- Effetto positivo sugli inestetismi della cellulite, per aumento della circolazione, capillarizzazione, ossigenazione e nutrizione locale, aumento della detossificazione, ginnastica vascolare ed effetto lipolitico
- Miglior penetrazione dei prodotti cosmetici per aumento della microcircolazione e riduzione della barriera elettrica cutanea
- Effetto detossificante o disintossicante per aumento della sudorazione e della liberazione di farmaci, tossine, inquinanti, ecc
- Effetto stimolante le difese immunitarie ed antivirali
- Effetto antalgico o antidolorifico
- Effetto rilassante muscolare o decontratturante
- Effetto relax

Vaporizzazione ed aroma

- Miglior assorbimento degli aromi per veicolazione con vapore attraverso le ghiandole sudoripare attivate al loro massimo grado e attraverso le ghiandole sebacee liberate dall'ingombro del sebo
- Effetto vasotonico, riducente e rassodante legato alle caratteristiche dei principi attivi aroma

Heat

- *Lipolytic or fat reducing effect: a beneficial effect on excess of fat and obesity, it stimulates local metabolism thanks to the infrared heating, which penetrates deeper in the body than it does with other methods*
- *Beneficial effect on cellulite due to an increasing of circulation, capillarisation, oxygenation and local nutrition, an increasing of detoxification, vascular gymnastics and lipolytic effect*
- *Better penetration of cosmetic products due to the increased micro-circulation and to the reduction of the skin electrical barrier*
- *Detoxifying or detoxicant effect due to increased perspiration and the elimination of drugs, toxins, pollutants etc.*
- *Stimulating effect on the immune system and on antiviral defenses*
- *Analgesic and pain-killing effect*
- *Muscle relaxing and soothing effect*
- *Relaxing effect*

Vaporization and aroma

- *Better absorption of aromas conveyed by steam, through sweat glands which are activated at their most and through sebaceous glands which are freed from sebum*
- *Vessel toning, reducing and firming effect due to the nature of aromatic active principles*

SLIM UP® ThermoBalance

Tecnologia ThermoBalance

- Applicazione alternata e sequenziale di riscaldamento e di raffreddamento a livello dermico profondo ed ipodermico
- Ricostruzione di un terreno microcircolatorio regolare, con ottimizzazione della nutrizione del tessuto e dell'allontanamento di scorie metaboliche e tossine
- Effetto pro-collagene, con ripristino dell'architettura tissutale e recupero dell'elasticità
- Controllo dell'adipe localizzato, con aumento dell'attività metabolica tessutale e modellamento delle forme

ThermoBalance technology

- *Alternate and sequential application of heating and cooling on deep dermal and hypodermal level*
- *Reconstruction of a regular microcirculatory system, with optimization of tissue nutrition and removal of metabolic waste and toxins*
- *Pro-collagen effect, with restoration of the tissue architecture and elasticity recovery*
- *Control of localized fat, with the increase of the tissue metabolic activity and shapes modelling*


SLIM UP® DRAIN

Drenaggio - Pressomassaggio

- Effetto drenante venoso o anti edema o che si oppone alla stasi circolatoria o che si oppone all'insufficienza venosa e quindi azione contro i gonfiori, la pesantezza degli arti, le varici o le vene varicose
- Effetto drenante linfatico o linfodrenante, che si oppone agli edemi o ristagni o stasi o pesantezza
- Effetto positivo sugli inestetismi della cellulite, grazie al drenaggio e al contrasto della stasi linfo-ematica, primo movente della cellulite

Drainage - Pressomassage

- *Venous or anti-oedema effect. i.e. an action against circulatory stasis and venous insufficiency, thus an action against swelling, heaviness of limbs, varices or varicosities*
- *Lymphatic drainage effect, which combats oedema, stagnation, stasis or heaviness*
- *Beneficial effect on cellulite blemishes, as it fights lymph and blood stasis, which is the first mover of cellulite, and thanks to its draining action*

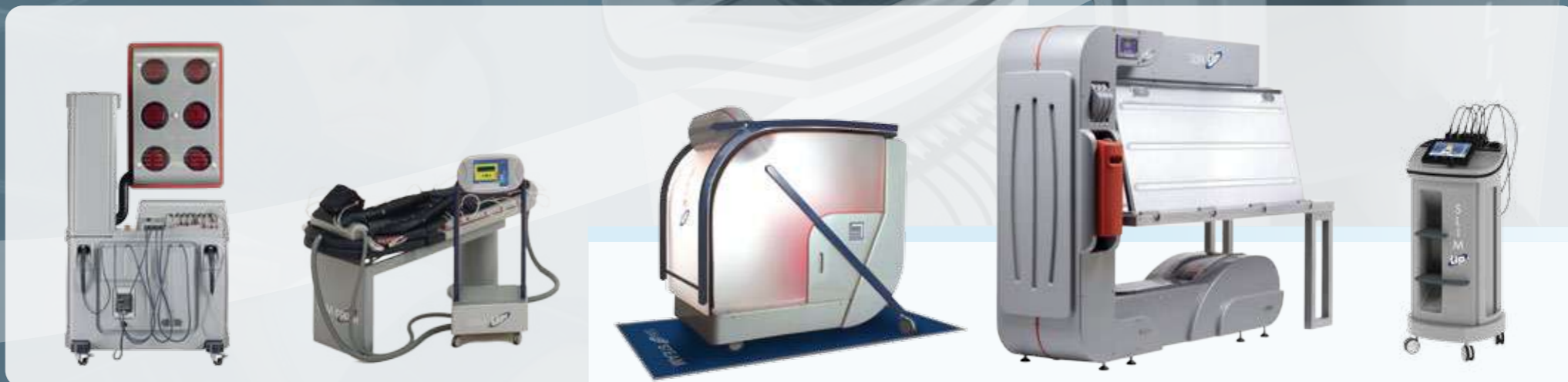

SLIM UP® TOP CENTER® 2.0



SLIM UP[®] STATION 2.0



POSSIBILITA' DI CONNETTERE UN DISPLAY ESTERNO VIA WI-FI
OPTIONAL EXTERNAL WI-FI DISPLAY

MISURATORE ALTEZZA E CIRCONFERENZA (motorizzato)
HEIGHT AND CIRCUMFERENCES MEASUREMENT DEVICE (motor-driven)

IMPEDENZIOMETRO
IMPEDANCE METER

ZONA DI REGISTRAZIONE E LETTURA CARD
CARD RECORDING AND READING AREA

TABLET DEDICATO AL CONTROLLO DELL'APPARECCHIO
APPLIANCE CONTROL TABLET

MANIGLIE per un più facile spostamento
HANDLES for easier appliance moving

RUOTE con blocco
CASTOR WHEELS with brake

STAMPANTE WI-FI
WI-FI PRINTER

IMPEDENZIOMETRO
IMPEDANCE METER

BILANCIA ESTRAIBILE (motorizzata)
EJECTABLE SCALE (motor-driven)

SLIM UP[®] STATION 2.0 (brevettata) è un'apparecchiatura che vi aiuta ad accompagnare il cliente passo a passo, dall'accoglienza nel Centro alla realizzazione di un programma personalizzato di trattamenti che utilizzi le apparecchiature del vostro Slim UP TOP CENTER[®] 2.0 secondo le esigenze del cliente e le sue caratteristiche morfologiche, tutto per la sua massima soddisfazione.

Il programma personalizzato generato da Slim UP[®] STATION 2.0 tiene conto delle motivazioni fisiologiche e tecnologiche per cui sono state progettate le altre macchine: Slim UP[®] STATION 2.0 definisce quindi il ciclo di trattamenti più adatto al vostro cliente, offre la possibilità di registrarlo sulla Slim UP[®] TOP CARD e memorizza al proprio interno i dati del primo controllo e di quelli successivi, creando così un archivio dei clienti del Centro.

Slim UP[®] STATION 2.0 è assolutamente intuitiva e facile da utilizzare tramite la App dedicata su tablet di ultima generazione. Effettua tutte le misurazioni elettronicamente: altezza, circonferenze corporee e relativa altezza di misurazione, peso e impedenza. Le analizza, ricavandone la composizione corporea distinta tra grassi e percentuali di acqua cellulare ed extracellulare. Il tutto avviene automaticamente e tramite procedura guidata, evitando quindi ogni possibilità di errore.

Slim UP[®] STATION 2.0 (patented) is a device that helps you to take care of your customers step by step, from welcoming her/him in your Center to conceiving a custom-made program which exploits all your Slim UP TOP CENTER[®] 2.0 equipment, taking care of the customer's needs and of her/his morphological characteristics, everything to achieve her/his utmost satisfaction.

The custom-made program generated by Slim UP[®] STATION 2.0 takes into account the physiological and technical motivation that have led to the development of the other units: Slim UP[®] STATION 2.0 settles the best treatment cycle for your customer and gives you the opportunity to store it onto the Slim UP[®] TOP CARD, also keeping in memory all the data of the first customer's check-up as of the following ones, creating in that way your customer's archive.

Slim UP[®] STATION is really user-friendly and easy to use through its latest generation tablet and its dedicated App. The device electronically performs all the measurement: height, body circumferences and the height of their measurement, weight and impedance. It analyzes these data and it gives you the subject's body composition, distinguishing between fat mass, intra-cellular and extra-cellular water. Everything goes automatically and it follows a preset wizard, avoiding all possible mistakes.




Come funziona la App:
- possibilità di creare un Nuovo Cliente e di consultare l'Archivio
- area Impostazioni riservata al Centro Estetico, dove inserire i propri dati e i costi dei propri trattamenti
- Brain Connection, per collegarsi direttamente con Sauna Italia
- Slim UP[®] TOP CARD per gestire le CARD dei clienti e controllarne l'avanzamento nel ciclo e per registrare manualmente BONUS CARD

How does the App works:
- New Customer registration and Customer Archive consultation
- Setting area for the Beauty Center data and the treatment amount
- Brain Connection, a way to directly connect to Sauna Italia
- Slim UP[®] TOP CARD, to manage your customer's personal cards, watching the progress in their cycle, and to manually register BONUS CARD

SLIM UP[®] TOP CARD

Slim UP[®] STATION 2.0 genera la TOP CARD. I trattamenti del ciclo vengono registrati sulla CARD personale del cliente e vengono automaticamente riconosciuti ed applicati dalle apparecchiature del vostro TOP CENTER. In ogni momento del ciclo, rileggendo la CARD è possibile sapere esattamente i trattamenti eseguiti e quelli ancora da eseguire.

Slim UP[®] STATION 2.0 generates the TOP CARD. The treatments of the cycle are registered on the personal customer's CARD: reading the CARD, each unit of your TOP CENTER will automatically detect and apply the right treatment. Reading a CARD during the cycle, you will know which treatment have been made and which ones are still to complete.

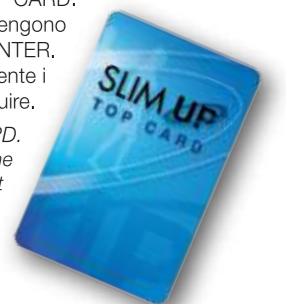


Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione:	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza assorbita:	400 W
Apparecchio di classe I	
Parti applicate di tipo BF	
Apparecchio per funzionamento continuo	

General technical specifications

Input voltage:	230 V~
Main frequency:	50/60 Hz
Power consumption:	400 W
Electrical safety Class I	
Applied accessories type BF	
Continuous operating device	



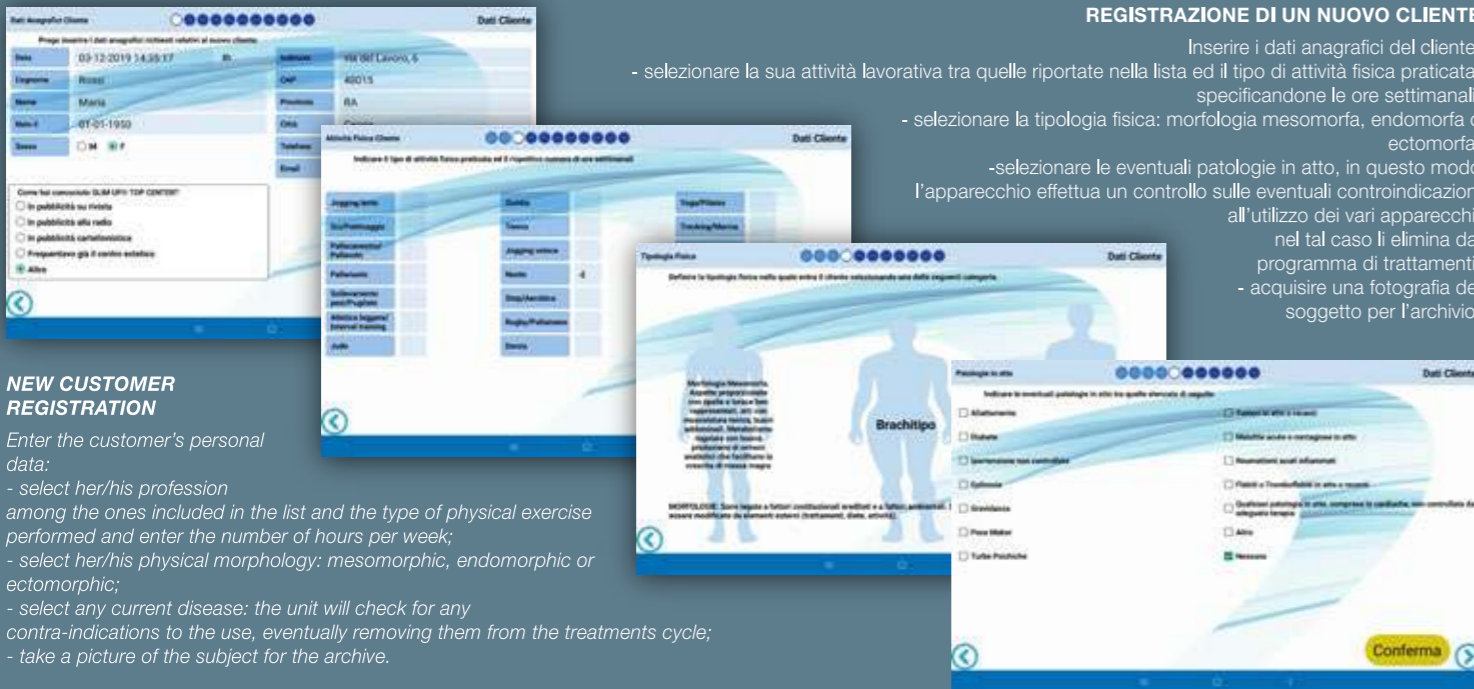

NEW CUSTOMER REGISTRATION

Enter the customer's personal data:
 - select her/his profession among the ones included in the list and the type of physical exercise performed and enter the number of hours per week;
 - select her/his physical morphology: mesomorphic, endomorphic or ectomorphic;
 - select any current disease: the unit will check for any contra-indications to the use, eventually removing them from the treatments cycle;
 - take a picture of the subject for the archive.

REGISTRAZIONE DI UN NUOVO CLIENTE

Inserire i dati anagrafici del cliente:
 - selezionare la sua attività lavorativa tra quelle riportate nella lista ed il tipo di attività fisica praticata, specificandone le ore settimanali;
 - selezionare la tipologia fisica: morfologia mesomorfa, endomorfa o ectomorfa;
 -selezionare le eventuali patologie in atto, in questo modo l'apparecchio effettua un controllo sulle eventuali controindicazioni all'utilizzo dei vari apparecchi, nel tal caso li elimina dal programma di trattamenti;
 - acquisire una fotografia del soggetto per l'archivio.



POSSIBILITA' DI SCELTA DEL PROGRAMMA

- **Slim UP your body** per definire un ciclo di trattamenti sulla base delle misurazioni del cliente;
 - 4 programmi preset con specifiche caratteristiche
 - **beautify**, migliora compattezza e tono della pelle
 - **be-well**, per il benessere a tutto il corpo
 - **age-defy**, per combattere i segni dell'età
 - **be-active**, per aumentare il tono muscolare o riprendersi dall'attività intensa.

CHOOSING THE BEST WORKING PROGRAM

- **Slim UP your body**, to set a treatment cycle designed upon the customer's detailed measurement;
 - 4 preset programs, each one with its specifics
 - **beautify**, to improve the tone and the firmness of skin
 - **be-well**, for whole body optimal well-being
 - **age-defy**, to fight the signs of aging
 - **be-active**, to increase muscle tone or recover after an intense workout

CICLO DI MISURAZIONI CLIENTE

- **ALTEZZA**: viene misurata facendo scendere l'altimetro fino a toccare la testa del cliente: l'apparecchio rileva il dato elettronicamente;
 - **CIRCONFERENZE**: spalle, torace, vita, ventre, fianchi e coscia, utilizzando la fettuccia inserita nell'altimetro: l'apparecchio rileva elettronicamente i dati di circonferenza e altezza di misurazione;
 - **PESO e IMPEDENZA**: rilevati elettronicamente attraverso la bilancia estraibile e i contatti metallici per mano e piede;
 - **INestetismi**: selezionare nell'elenco gli eventuali inestetismi che presenta il cliente e la loro localizzazione.



CUSTOMER'S MEASURING CYCLE

- **HEIGHT**: it's taken lowering the bar until it touches the customer's head: the unit will detect the data electronically;
 - **CIRCUMFERENCES**: shoulders, chest, waist, tummy hips and thighs, using the tape included in the meter: the unit will electronically detect the circumference and the height of the measurement;
 - **WEIGHT and IMPEDANCE**: electronically detected by the sliding scale and the metal-plates for hand and foot;
 - **BLEMISHES**: selecting out of the list any imperfection of the customer's body and its location.



INDICI CORPOREI

L'apparecchio elabora i dati rilevati e presenta, attraverso grafici e descrizioni, un quadro del cliente con valutazione di **peso ideale, massa magra e massa grassa**, valori di **idratazione corporea**, situazioni localizzate di **scostamento dalla silhouette ideale**.

BODY INDEXES

The unit analyses the customer's data and it provides descriptions and visual informations about **ideal weight, fat and fat-free mass, hydration and silhouette comparison** with the ideal values.



CICLO RISULTANTE

Viene elaborato il ciclo di trattamenti più idoneo alla situazione del cliente e mostrato attraverso la griglia delle sedute, con nome del trattamento e sequenza consigliata; per i trattamenti che utilizzano piastre o elettrodi viene presentato inoltre il corretto posizionamento sul corpo. Vengono anche indicati i controlli intermedi e finale di SlimUP STATION 2.0 e il momento giusto per effettuarli.

RESULTING CYCLE

The unit calculate the best treatment cycle for the customer's situation and shows it through a grid of sessions, with the best programs sequence; you can also watch the right placement of plates or electrodes for the treatments that need their applications. The cycle also shows you the intermediate and final controls of SlimUP STATION 2.0 and the right moment to carry out them.



SlimUP STATION 2.0 gives some general **EATING HINTS** (in case of necessity, the unit suggests the customer to follow a diet) and some **EXERCISES HINTS** to improve the tone where the customer needs, with pictures to better understand the suggested movements.

SlimUP STATION 2.0 defines the **TOTAL AMOUNT** of the cycle, depending on the costs of each single treatment you set up; there is also the possibility to choose a reduced cycle, with less sessions and a lower amount.

In the **PRINT** section, you can easily save, print or e-mail to your customer all the measurement taken, the analysis results, the amount of the treatment cycle, the eating and exercises hints.

SlimUP STATION 2.0 fornisce **CONSIGLI ALIMENTARI** di base (in caso di necessità rilevata dai parametri, viene consigliata una dieta) e **CONSIGLI GINNICI** mirati alla tonificazione delle zone in cui il cliente ha più necessità, visualizzati graficamente per una miglior comprensione.

SlimUP STATION 2.0 calcola automaticamente l'**IMPORTO DEL CICLO** di trattamenti sulla base dei costi da voi impostati per ogni apparecchiatura, con la possibilità di optare per una riduzione del numero di sedute e dell'importo totale.

Tramite la sezione **STAMPA**, tutte le misurazioni, i risultati dell'analisi, i costi e i consigli alimentari e ginnici possono essere comodamente salvati, stampati o inviati via e-mail al cliente.

ARCHIVIO CLIENTI.

In quest'area vengono registrati tutti i dati di ogni cliente: dati anagrafici, i vari set di misurazioni effettuate, sia per il primo check che per i successivi controlli, con i relativi indici corporei calcolati ed il ciclo di trattamenti previsto. Attraverso la lettura della TOP CARD è possibile richiamare automaticamente la scheda del cliente e visualizzare lo stato di avanzamento del suo ciclo di trattamenti.

CUSTOMER'S ARCHIVE.

Area dedicated to each customer's data storage: anagraphic data, set of measurement taken, both the first one and the following check-ups, body indexes and resulting cycle of treatments. Through the TOP CARD you can directly access to the customer's sheet and you can see the progress of the treatments cycle.

SLIMUP[®] STATION 2.0




SLIM UP® ULTRA è un'apparecchiatura in grado di offrire un ventaglio completo di metodiche che sfruttano energie tra loro sinergiche capaci di trattare le problematiche del corpo in maniera totale. La forza, unica nel settore, di Slim UP® ULTRA sta proprio nella studiata sinergia delle associazioni, capaci di colpire un problema estetico da più direzioni e con potenza esaltata dalla concordia degli effetti. Aver integrato potenti fonti di ultrasuono ad un insieme infrarosso-elettrostimolazione ampiamente collaudato e sperimentato in ambito scientifico rappresenta una innovazione decisiva in campo estetico. L'estetica professionale ha in questo modo a disposizione uno strumento evoluto, complesso, ma semplicissimo da usare.

Slim UP® ULTRA è però qualcosa di più anche nel settore ringiovanimento e rassodamento del viso e del corpo attraverso due manipoli che inaugurano strade nuove ed affascinanti di trattamento.


Slim UP® ULTRA offers a complete range of treatments which employ synergetic energies for globally treating unsightly body imperfections. Its absolutely unique strength lies in a careful and detailed examination of energy associations and their ability to deal with each cosmetic problem from many directions: in this way, its power is boosted by these concerted effects. The integration of a widely laboratory tested infrared-electro stimulation treatment with strong ultrasound wave sources represents a decisive innovation in the cosmetic industry, giving the professional beautician an advanced, complex yet easy-to-use tool.

But, Slim UP® ULTRA also represents an important advance concerning rejuvenating and firming face and body, through two hand pieces which open up new and fascinating horizons in cosmetic treatment.

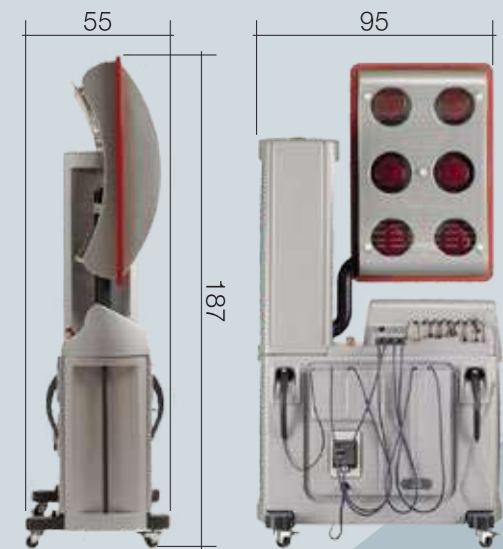

SLIM UP® ULTRA occupa pochissimo spazio, solo mezzo metro quadrato. L'apparato infrarossi è contenuto nella macchina quando a riposo e si adatta a qualsiasi lettino compreso tra 65-80cm.

SLIM UP® ULTRA takes up very little room, only half a square meter. The IR appliance is included in the device depth when not working and it can be adjusted for any couch with 65-80cm height.

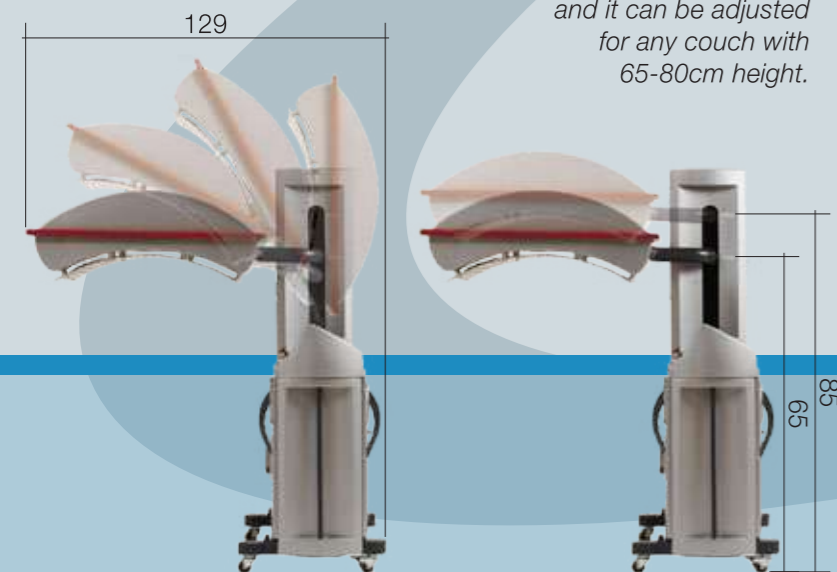

LAMPADE I.R. con PROTEZIONE IN POLICARBONATO
I.R. LAMPS with POLYCARBONATE PROTECTION

RETRO-CONSOLLE con gestione di elettrostimolazione, ultrasuoni e manipoli
REAR-CONSOLLE to control electrostimulation, ultrasounds and handpieces

GRIGLIA DI AERAZIONE
VENTILATION OUTLET

APPARATO INFRAROSSO in posizione orizzontale, di lavoro (verticale e contenuto nelle dimensioni della macchina quando a riposo)
INFRARED APPLIANCE in its horizontal working position (while it is vertical and included in the device size when not working)

SEGNALE LUMINOSO di macchina in movimento
machine in movement
WARNING INDICATOR

SCALA GRADUATA per adattare l'apparato IR a lettini tra 65 e 80cm di altezza
GRADUATED SCALE to regulate the IR appliance to couches 65 to 85cm height

PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL

Letto SLIM UP TOP CARD
SLIM UP TOP CARD reader

MANIGLIE per un più facile spostamento
HANDLES for easier appliance moving

CASSETTIERA portaoggetti
Spacious DRAWER

RUOTE con blocco
CASTOR WHEELS with brake

SLIM UP® TOP CARD



Dotata di sistema di lettura a transponder delle TOP CARD sulle quali sono residenti i trattamenti registrati dalla Slim UP® STATION 2.0; dopo essere stati effettuati vengono automaticamente scalati dalla Top Card.

Equipped with transponder uploading system for the Top Cards in which the treatments recorded by the Slim UP® STATION 2.0 are stored; after having been performed, treatments are automatically taken off the Top Card.

SLIM UP® ULTRA



Una sofisticata centralina di controllo, gestita da microprocessori, di facile utilizzo, gestisce tutte le funzioni di Slim UP® ULTRA.

E' possibile scegliere tra 7 programmi preimpostati, ciascuno dedicato ad un obiettivo specifico:

- **SLIM:** mirato allo snellimento in presenza di cellulite;
- **TONE:** per ottenere il recupero del tono muscolare e cutaneo;
- **MODEL:** per promuovere sia il rassodamento che lo snellimento;
- **LIPOCELL:** mirato a capillarizzazione, miglioramento del microcircolo e del drenaggio;
- **MASS:** per aumenti mirati della massa muscolare;
- **FIBROCELL:** per lavorare sugli inestetismi di celluliti persistenti e fibrose;
- **MEGASLIM:** potente trattamento lipolitico e fibrolitico, indicato nei casi di adiposità particolarmente accentuata.

A sophisticated easy-to-use control unit, managed by microprocessors, controls all the Slim UP® ULTRA functions.

There are 7 resident programs:

- **SLIM:** aimed at slimming in presence of cellulite;
- **TONE:** to obtain improved muscle and skin tone;
- **MODEL:** to promote both a toning and a slimming effect;
- **LIPOCELL:** aimed at capillarization, improving micro-circulation and drainage;
- **MASS:** for targeted muscular mass volume increases;
- **FIBROCELL:** to actively intervene on imperfections of old and persistent cellulite;
- **MEGASLIM:** the most powerful lipolytic and fibrolytic treatment, indicated in cases of particularly accentuated adiposity.

6 SORGENTI DI RAGGI INFRAROSSI

6 INFRARED RAYS SOURCES

20 SORGENTI DI ULTRASUONI AD ALTA POTENZA PER IL CORPO

20 HIGH POWER BODY ULTRASOUND SOURCES

8 SORGENTI PER ELETTROSTIMOLAZIONE CORPO


8 SOURCES FOR BODY ELECTROSTIMULATION

MANIPOLO VISO PER ULTRASUONI

FACE HAND PIECE FOR ULTRASOUND TREATMENT

MANIPOLO VISO A LUCE BIANCA ED ELETTROSTIMOLAZIONE

WHITE LIGHT AND ELECTROSTIMULATION HAND PIECE

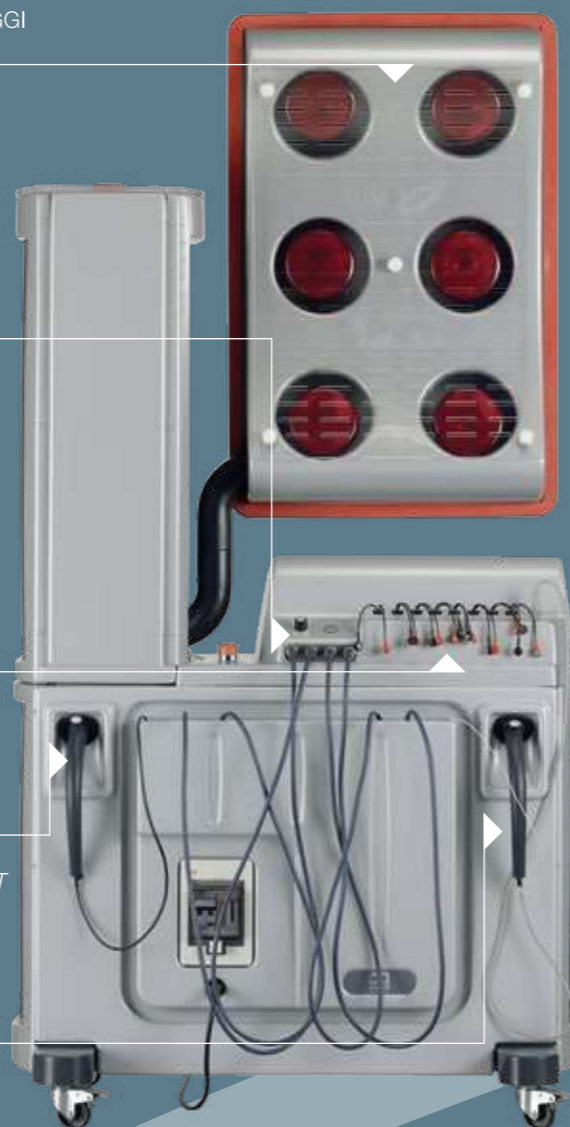

SLIM UP® ULTRA è ultrasuoni

Le 20 sorgenti di ultrasuono ad alta potenza di Slim UP® ULTRA generano delle vibrazioni, sotto forma di onde ultrasonore: attraversando i tessuti, queste perdono parte della loro energia, generando un incremento della temperatura, una vibrazione delle particelle attraversate e modificazioni della permeabilità cellulare, amplificando così l'effetto degli infrarossi sulle adiposità localizzate. Quest'azione colpisce il bersaglio anche per un effetto "cavitativo" (cioè distruttivo diretto per esplosione di microbollicine liquide) e permeabilizzante sulla membrana delle cellule adipose.



SLIM UP® ULTRA è elettrostimolazione

electrostimulation section

I 16 elettrodi adesivi di Slim UP® ULTRA chiudono il cerchio di un trattamento a tutto campo delle problematiche estetiche del corpo. Una corrente modulata ad onda quadra bidirezionale mantiene e recupera tonicità anche nei settori più compromessi; l'uso di frequenze e programmi specifici permette di lavorare sui grandi fasci muscolari profondi al fine di modellare le forme, ma anche sui sottilissimi fasci superficiali e sottocutanei, con lo scopo di recuperare gli afflosciamenti del tono cutaneo. L'effetto antalgico e miorelaxante degli infrarossi e dell'ultrasuono rende la corrente di Slim UP® ULTRA delicatissima ed inavvertita, togliendo qualsiasi fastidio al trattamento. In questo modo, l'associazione di più azioni permette di affrontare concretamente grasso e cellulite recuperando tono cutaneo, modellando le forme in modo armonico e coprendo attivamente tutte le principali situazioni estetiche del corpo.

The 16 adhesive electrodes of Slim UP® ULTRA complete the series of global treatments for a more beautiful body. Modulated, bidirectional square wave current maintains and improves tone even in the most difficult areas; the use of specific frequencies and programs makes it possible to work on large, deep muscle groups for shaping the silhouette, as well as on the very thin superficial and subcutaneous muscle groups, for improving the loose skin tone. The analgesic and myorelaxing effect of the infrared rays and ultrasound waves make the Slim UP® ULTRA current very gentle and imperceptible, eliminating any and all discomfort during treatment. The association of several actions makes it possible to concretely deal with fat and cellulite, by improving skin tone, harmoniously shaping the silhouette and treating the main body imperfections.



Slim UP® ULTRA possiede inoltre 2 manipoli attraverso i quali è possibile applicare trattamenti mirati. Il manipolo US viso-corpo attiva i fibroblasti e favorisce la veicolazione di principi attivi antiage del viso, ma anche per il trattamento di zone particolari del corpo, come interno cosce, braccia, zona ombelicale, seno. Il manipolo EMS viso integra una luce bianca atermica ad alta intensità alla elettrostimolazione, con effetti trofici cutanei, rassodanti, biostimolanti. La ginnastica del viso assieme all'energia del fascio luminoso svolgono perfettamente un'attività ringiovanente, antiossidante, levigante, elasticizzante e schiarificante cutanea, oltre ad una tonificante e rassodante muscolare profonda.

Slim UP® ULTRA also allows you very targeted treatments through its 2 hand-pieces. The US hand-piece for face and body activates fibroblast and it favours the diffusion of active substances for anti-age face treatment, but also in the treatment of particular areas of the body, like the inner thigh, arms, belly and breast areas. The EMS face hand-piece combines an athermic high intensity white light with electro stimulation, for toning and biostimulating trophic cutaneous effects. This face gymnastics together with the energy of this luminous band have an action of rejuvenating, anti-oxidising, smoothing, elasticizing and skin lightening, with deep muscle firming and toning effects.

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione:	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza assorbita:	900 W
Potenza disponibile alle lampade:	600 W (n.6 lampade, 100 W cad.)
Apparecchio di classe I	Parti applicate di tipo BF
Apparecchio per funzionamento continuo	
Sezionamento e protezione con interuttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità	

General technical specifications

Input voltage:	230 V~
Main frequency:	50/60 Hz
Power consumption:	900 W
Available power for lamps:	600 W (for 6 lamps, 100 W each)
Electrical safety Class I	Applied accessories type BF
Continuous operating device	
Sectioning and cutout by switch high-sensitivity residual current circuit breaker	

SLIM UP® ULTRA è infrarossi

infrared section

Il cuore di Slim UP® ULTRA è dato da 6 sorgenti di raggi infrarossi, raggi a lunghezze d'onda selezionate tra quelle più capaci di penetrare attraverso la barriera epidermica e di agire alla profondità più utile all'estetista, quella cioè in cui si trovano gli inestetismi della cellulite e si accumulano cellule adipose. Grazie agli infrarossi, la possibilità innalzare la temperatura in questi settori consente di aumentare il metabolismo del tessuto adiposo in modo consistente e prolungato. E' possibile in questo modo svolgere un'azione riducente sugli accumuli di adipe e modellare la silhouette. Gli effetti benefici dei raggi infrarossi sono però molteplici e riguardano l'aumento della velocità del drenaggio linfatico, il miglioramento dell'ossigenazione e della nutrizione tissutale, l'effetto rigenerante, cicatrizzante ed antiage sulla pelle, il miglioramento della penetrazione di prodotti cosmetici, l'azione rilassante muscolare ed antidolorifica oltre allo spiccato miglioramento dell'umore e l'effetto relax: queste azioni estendono il campo di interesse dei raggi al trattamento multifattoriale della cellulite in tutte le sue varie forme, a quello del rassodamento cutaneo e di stimolo per il circolo superficiale e profondo.

The heart of Slim UP® ULTRA is based on 6 sources of infrared rays with wave lengths selected from those with the power to penetrate the skin barrier and to act at a depth most useful to the beautician, i.e. the depth at which cellulite imperfections and fat cells accumulate. Thanks to the infrared rays, which raise the temperature in these areas, the metabolism of the fatty tissue is consistently increased for prolonged periods. This achieves a reducing action on fat accumulations and sculpts the silhouette.

The beneficial effects of the infrared rays are numerous: faster lymphatic drainage; improved tissue oxygenation and nutrition; regenerating, healing and anti-age effect on the skin; improved penetration of cosmetic products; muscle relaxing and pain relief action as well as a marked improvement in mood. These actions extend the rays field of action to the multifactorial treatment of cellulite, in all of its various forms, the toning of the skin and stimulating superficial and deep circulation.

SLIM UP® ULTRA

SLIM UP® STEAM é un'apparecchiatura per estetica che abbina l'effetto termico dei raggi infrarossi agli effetti benefici del vapore e dell'aromaterapia; dispone di cinque programmi che alternano e combinano queste funzioni per ottenere un effetto vasotonificante, rassodante, riducente e dimagrante, in base alle necessità; è un apparecchio fondamentale per il trattamento multifattoriale della cellulite.



CENTRALINA ELETTRONICA con microprocessore, sofisticata ma di facile utilizzo, gestisce tutte le funzioni di Slim UP® STEAM

CONTROL UNIT, sophisticated but user-friendly, microprocessor-controlled, it manages all of Slim UP® STEAM functions.

INFRAROSSI laterali
Side INFRA-RED LAMPS

SERBATOIO acqua di scarico
Waste WATER TANK

RUOTE PIVOTTANTI con freno, per un facile spostamento

CASTOR WHEELS with brake, for an easy movement

INFRAROSSI frontali
Front INFRA-RED LAMPS

Apertura comoda e leggera
Easy-opening

Slim UP® STEAM si prende cura dei tuoi clienti con 4 tipi di benefici:

- A) un effetto drenante, in caso di ritenzione idrica, edema, cellulite linfedematosa, e sovrappeso dato dall'aumento della componente corporea liquida.
- B) un effetto lipolitico in caso di eccessiva presenza di grasso.
- C) un effetto benefico in presenza di ogni tipo di cellulite, dovuto alla miglior irrorazione ematica locale, al miglior drenaggio, all'allontanamento delle tossine e dei prodotti di rifiuto ed alla lipolisi.
- D) un effetto rassodante cutaneo, dovuto alla forte penetrazione di olii essenziali.

Slim UP® STEAM is a patented beauty therapy unit combining the thermal effect of infrared rays with the beneficial effects of steam and aromatherapy; it features five programmes alternating and combining these functions for obtaining a vessel toning, firming, reducing and slimming effect according to needs; this is an essential unit for the multi-factor treatment of cellulite.

Slim UP® STEAM helps your customers in 4 ways:

- A) a draining effect, in case of water retention, oedema, cellulite with lymph-oedemas, and excess weight due to the increase of the body liquid component*
- B) a lipolytic effect in case of excess weight*
- C) a beneficial effect in presence of any kind of cellulite, due to a better local vascularization, to the improved drainage, to the elimination of toxins and of waste products and to lipolysis*
- D) skin firming effect, due to the deep penetration of essential oils.*

Indipendente dalla rete idrica grazie al suo SERBATOIO di carico acqua

Independent by the water system thanks to its filling WATER TANK

3 vaschette per la gestione di 3 differenti aromi

3 reservoirs for managing 3 different aromas

Svuotamento serbatoio acqua di scarico

Removing waste water tank

5 programmi automatici di lavoro che alternano e combinano il funzionamento di Infrarossi, Vapore ed Aromaterapia (con la selezione di 3 differenti aromi) e 3 funzioni per la selezione manuale di IR, VAP e AROMI. 3 soli pulsanti di selezione ed una completa ed immediata visualizzazione del display alfanumerico retroilluminato, permettono una facile selezione di tutte le funzioni.

5 automatic working programs which alternate and combine the operation of infrared rays, steam and aromatherapy (with the opportunity to select 3 different aromas) and 3 functions for the manual selection of IR, steam and aromas.

Only 3 buttons, along with a complete and immediate response of the back-lit alphanumerical display, make all functions easily selectable.

SLIM UP® TOP CARD

Slim UP® STEAM dispone del sistema di lettura a transponder per le TOP CARD registrate dalla Slim UP® STATION 2.0: una volta effettuati, i trattamenti vengono scalati dalla Card.

Slim UP® STEAM uses the transponder reader for the Top Cards recorded by the Slim UP® STATION 2.0; once performed, the treatments are taken off the Card.

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione:	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza assorbita:	3000 W
Potenza disponibile alle lampade:	900 W (n.9 lampade, 100 W cad.)
Potenza disponibile per vapore:	2000 W
Apparecchio di classe I	Apparecchio per funzionamento continuo
Sezionamento e protezione con interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità	

General technical specifications

Input voltage:	230 V~
Main frequency:	50/60 Hz
Power consumption:	3000 W
Available power for lamps:	900 W (for 9 lamps, 100 W each)
Power of steam generator:	2000 W
Electrical safety Class I	Continuous operating device
Sectioning and cutout by switch high-sensitivity residual current circuit breaker	

SLIM UP® STEAM



SLIM UP® Big Steam rappresenta la naturale alternativa, all'interno del vostro TOP CENTER, a Slim UP® STEAM: un prodotto che apporta gli stessi benefici ma con una situazione di comfort maggiore per il vostro cliente, che dispone di un vero e proprio lettino integrato per il più totale relax durante i trattamenti.

Anche in questo caso, il benessere termico degli infrarossi, del vapore e la terapia degli aromi lavorano insieme per raggiungere un effetto tonificante, rassodante, dimagrante, nonché un trattamento mirato al trattamento multifattoriale della cellulite e dei suoi inestetismi.

Slim UP® Big Steam is the natural alternative of Slim UP® STEAM in the composition of your TOP CENTER: it is a device that aims to the same results, giving to your customer an even more comfortable condition thanks to its integrated couch, to totally relax during the treatment.

Using Slim UP® Big Steam too, the beneficial effects reached by the infrared thermal function together with the steam and the aromatherapy give a whole toning, firming and slimming result. Like Slim UP® STEAM, this is an essential device for the multifactorial treatment of cellulite and its imperfections.

Visualizzazione riserva aromi: tre indicatori luminosi dedicati a ciascuno dei serbatoi degli aromi segnalano quando il contenuto è in esaurimento.

Displaying aroma stock: three LED signals dedicated to the aroma tanks shows when they are getting empty.



Visualizzazione riserva acqua: un segnale luminoso indica quando il serbatoio di carico dell'acqua è in esaurimento.

Displaying water stock: a LED signal shows when the water tank is close to emptying.

5 programmi automatici di lavoro analoghi a quelli di Slim UP® STEAM .
3 soli pulsanti di selezione ed una completa ed immediata visualizzazione del display alfanumerico retroilluminato.

5 automatic working programs, exactly like the Slim UP® STEAM ones.

Only 3 control buttons and a complete and immediate response of the back-lit alphanumeric display.



3 vaschette per la gestione di 3 differenti aromi

3 reservoirs for managing 3 different aromas



Indipendente dalla rete idrica grazie al suo SERBATOIO di carico acqua

Independent by the water system thanks to its filling WATER TANK

Svuotamento serbatoio acqua di scarico


Removing waste water tank




SLIM UP® TOP CARD

Grazie al transponder integrato, Slim UP® Big Steam è in grado di rilevare automaticamente il trattamento da eseguire e scarlarlo dalla TOP CARD del cliente.

Thanks to its transponder system, Slim UP® Big Steam automatically starts the right treatment and delete it from the customer's CARD.

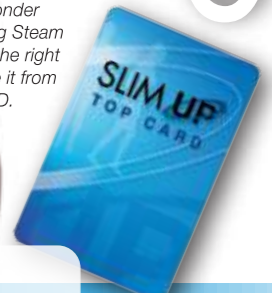

Dimensioni
Dimensions

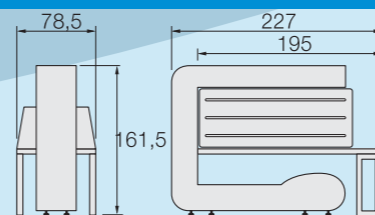

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione: 230 V~
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Potenza assorbita: 3100 W
Potenza disponibile alle lampade: 1100 W (n.11 lampade, 100 W cad.)
Potenza disponibile per vapore: 2000 W
Apparecchio di classe I Apparecchio per funzionamento continuo
Sezionamento e protezione con interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità

General technical specifications

Input voltage: 230 V~
Main frequency: 50/60 Hz
Power consumption: 3100 W
Available power for lamps: 1100 W (for 11 lamps, 100 W each)
Power of steam generator: 2000 W
Electrical safety Class I Continuous operating device
Sectioning and cutout by switch high-sensitivity residual current circuit breaker

SLIM UP® Big Steam



SLIM UP® DRAIN é un'apparecchiatura per il drenaggio e il presso-massaggio a tutto il corpo, suddiviso in tre sezioni, testa e viso, arti superiori ed arti inferiori. Una sofisticata centralina elettronica di controllo, gestita da un microprocessore, vi permette di sfruttare tutte le funzioni di Slim UP® DRAIN in modo facile e intuitivo.

Slim UP® DRAIN it's a unit for total body drainage and presso-massage: it is designed for three different sections, the head and face, the upper limbs and the lower limbs.

A sophisticated yet user friendly electronic unit, controlled by a microprocessor, manages all the Slim UP® DRAIN functions.



CENTRALINA ELETTRONICA
DI CONTROLLO
ELECTRONIC CONTROL UNIT

UNITA' DI POTENZA
POWER UNIT

Sistema di connessione
RAPID AIR
RAPID AIR connection
system



Visualizzazione dei parametri e dei singoli programmi

Slim UP® DRAIN dispone di una ampia area di visualizzazione a mezzo display grafico retroilluminato che consente di evidenziare i singoli programmi e specificamente le loro sequenze, le zone del corpo in compressione, le pressioni reali sia di set-up che istantanee, (rappresentate anche graficamente), i tempi di pausa settore e di pausa dopo ogni ciclo.

Displaying parameters and single programs

Slim UP® DRAIN features a wide graphical back-lit display: it shows all the programs and every single working sequence; it focus the body areas under compression and the pressure values, both the setup and the actual applied ones (which are also graphically represented), and it shows the pause times between sectors and cycles.

Impostazione dei parametri di trattamento

Slim UP® DRAIN dispone di soli 4 pulsanti specifici per consentire un immediato utilizzo della macchina; il software e l'interfaccia grafica sono stati studiati con l'obiettivo di rendere l'operatività di Slim UP® DRAIN davvero facile ed intuitiva.

Setting treatment parameters

Slim UP® DRAIN features only 4 buttons, through them you will immediately be operating with the machine; both the software and the graphical interface have been designed to make Slim UP® DRAIN truly user-friendly.



RUOTE PIVOTTANTI con freno,
per un facile spostamento
CASTOR WHEELS whit brake,
for an easy movement

SLIM UP® TOP CARD

Lettura a transponder per le TOP CARD registrate dalla Slim UP® STATION 2.0: una volta effettuati, i trattamenti vengono scalati dalla Card.
Transponder reader for the Top Cards recorded by the Slim UP® STATION 2.0; once performed, the treatments are taken off the Card.

SLIM UP® DRAIN



LE 3 SEZIONI DI SLIM UP® DRAIN

A - Sezione testa-viso

Caschetto con poggiatesta integrato per il trattamento sequenziale del viso (mento, guance, fronte, collo e nuca. Nuca e collo con sistema Sea Wave). Il poggiatesta attrezzato dispone di 6 uscite per altrettanti settori del casco e di un sistema di innesto immediato alla macchina (RAPID-AIR).

B - Sezione arti superiori

n°2 bracciali con 7 settori sistema Sea Wave per il trattamento sequenziale degli arti superiori e palmare integrato per l'appoggio della mano affinché la pressione si eserciti esclusivamente sul palmo e sul dorso evitando la compressione laterale. La particolare anatomia del bracciale, regolabile a velcro, integrato dal palmare, consente di trattare l'arto senza soluzione di continuità, dalla mano alla parte superiore della spalla.

La sezione è alloggiata nel pratico container (brevettato), appendibile e di immediato utilizzo, collegato alla macchina con un sistema ad innesto immediato capace di riconoscere la sezione di corsetteria alla quale è dedicato (RAPID AIR).

C - Sezione arti inferiori, fianchi, inguine

n°2 gambali, n°2 cosciali, n°2 pressori inguinali, n°1 corsetto per trattare fianchi e glutei. Ogni gambale è composto di 4 settori Sea Wave e di un plantare costituito da una soletta di materiale automodellante, una soletta rigida sagomata e da una camera d'aria, concepiti in modo da applicare la pressione sempre sotto la pianta del piede e mai lateralmente.


Dalla pianta del piede, e per tutto l'arto, la pressione viene applicata senza soluzione di continuità.

Il cosciale consente di regolare l'estensione del gambale ed adeguarlo alle diverse lunghezze degli arti. Il pressore inguinale, anatomicamente realizzato, consente un perfetto drenaggio linfatico della zona inguinale.

Il corsetto per fianchi e glutei è unificato e si compone di 2 settori sistema Sea Wave. La regolazione della corsetteria, realizzata a velcro, consente l'estensione a parti anatomiche di dimensioni estremamente diverse.

La sezione è alloggiata nel pratico container (brevettato), appendibile e di immediato utilizzo, collegato alla macchina con un sistema ad innesto immediato capace di riconoscere la sezione di corsetteria alla quale è dedicato (RAPID AIR).

Sea Wave è il sistema di segmenti autosormontanti che, gonfiandosi sequenzialmente e ciascuno prima che il precedente sia completamente svuotato, consente una pressione selettiva e progressiva senza soluzione alcuna di continuità.

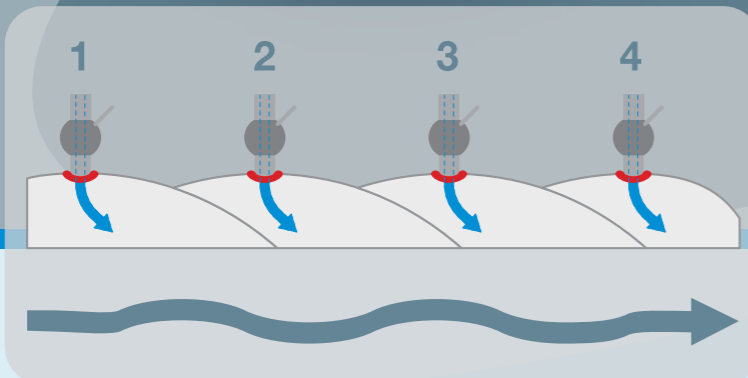

THE 3 WORKING SECTION OF SLIM UP® DRAIN

A - Head-face section

Helmet with a built-in headrest for sequential treatment of the face (chin, cheeks, forehead, front and back of neck. Front and back of neck with Sea Wave System).

The headrest has 6 outlets for a correspondent number of sectors in the helmet, as well as a system for immediate connection to the machine (RAPID-AIR).

B - Upper limbs section

2 arm-pieces with 7 Sea Wave sectors for the sequential treatment of upper limbs and an integrated palm-piece for the hand in order to exercise pressure solely on the palm and on the back of hand with no crushing at the sides.

The particular anatomy of the arm-piece, which is adjustable through a velcro fastening, additionally to the palm piece, allows you to treat the limb uninterruptedly from the hand to the upper shoulder. This section is housed in the handy (patented) hangable container, fit for immediate use: it connects to the machine with a quick coupling system, capable of recognising the corset element which it is dedicated to (RAPID AIR).

C - Section for lower limbs, hips, groin

2 leg-pieces, 2 thigh-pieces, 2 groin compressors, 1 corset element for treating hips and buttocks. Each leg-piece consists of 4 Sea Wave sectors and of an arch support made by a sole of self-moulding material, a rigid shaped sole and an air bladder, designed for exercising pressure under the sole of the foot and never at its sides.

The pressure is applied from the sole of the foot all along the limb with no interruption. The thigh-piece makes it possible to adjust the extension of the leg-piece and to adapt it to the different heights of the limbs. The anatomically designed groin compressor allows a perfect lymphatic drainage of the groin area.

The corset for hips and buttocks is made of one piece only and consists of 2 Sea Wave sectors.

The adjustment of the corset elements through a velcro fastening allows you to extend them to very different sized anatomical parts.

This section is housed in the handy (patented) hangable container, fit for immediate use: it connects to the machine with a quick coupling system, capable of recognising the corset element which it is dedicated to (RAPID AIR).

Sea Wave is a system made up of overlapping segments: each of these is sequentially inflated before the previous one is totally deflated. This enables a selective and progressive pressure without interruptions.

B - CONTAINER (brevettato)
alloggia la sezione arti superiori (appendibile)

B - CONTAINER (patented)
it houses the upper limbs section (hangable)


C - CONTAINER (brevettato)
alloggia la sezione arti inferiori (appendibile)

C - CONTAINER (patented)
it houses the lower limbs section (hangable)



A - CONTAINER (brevettato)
alloggia la sezione testa-viso
A - CONTAINER (patented)
it houses the head-face section

Sistema di connessione
RAPID-AIR, immediato, riconosce
la sezione in uso
RAPID-AIR connection system
immediate coupling and active
section identification

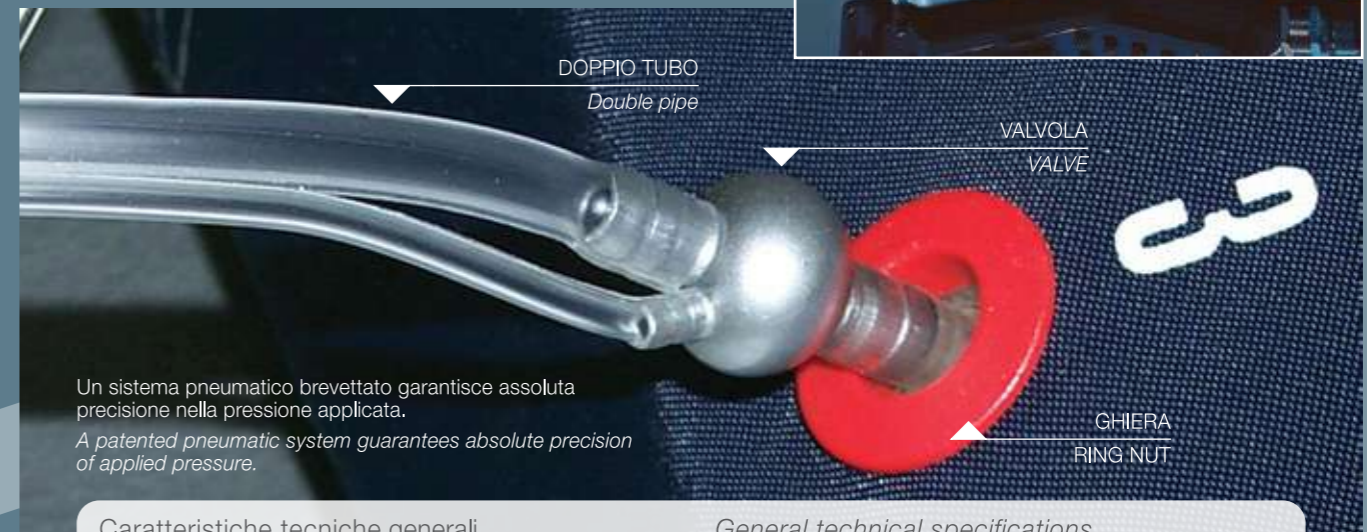

Un sistema pneumatico brevettato garantisce assoluta precisione nella pressione applicata.

A patented pneumatic system guarantees absolute precision of applied pressure.

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione:	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza assorbita:	300 W
Apparecchio di classe I	
Parti applicate di tipo BF	
Apparecchio per funzionamento continuo	

General technical specifications

Input voltage:	230 V~
Main frequency:	50/60 Hz
Power consumption:	300 W
Electrical safety Class I	
Applied accessories type BF	
Continuous operating device	

SLIM UP® DRAIN

Un approccio completamente nuovo agli inestetismi con i quali ci confrontiamo giornalmente, la così detta cellulite, la perdita di tonicità e l'eccesso di adipe localizzato.

SLIM UP® ThermoBalance ricostruisce una situazione anatomica e metabolica ottimale degli strati profondi del tessuto, ricreando un corretto ambiente micro circolatorio con adeguati scambi arterovenosi, stimolando la produzione di neocollagene vitale e riducendo l'eccesso di adipe localizzato.

Sei piastre esclusive e dedicate sono il cuore del sistema Thermobalance, capace di unire per la prima volta in modo mirato il riscaldamento della radiofrequenza al raffreddamento del sistema a celle di Peltier. Questa innovazione passa attraverso un progetto unico di elettrodi monocliente, adesivi e pregellati, un sistema innovativo di dissipazione del calore e una metodica esclusiva di monitoraggio, controllo e modulazione autonoma dell'apparecchio di tutto il processo di trattamento.

Una sperimentazione scientifica mirata ha confermato la diffusa normalizzazione e il miglioramento dell'architettura del tessuto nel suo complesso.

A totally new approach to imperfections that we are facing everyday, the so-called cellulite, loss of tone and localized fat excess.

Slim UP® ThermoBalance reconstructs an optimal anatomical and metabolic situation of the tissue deep layers, by recreating a correct microcirculatory environment with adequate arteriovenous exchanges, by stimulating the production of vital new collagen and reducing the excess of localized fat.

Six dedicated and exclusive plates are the heart of Thermobalance system, able to combine for the first time in a targeted manner the radiofrequency heating to Peltier cell cooling system.

This innovation passes through a unique project of pregelled single-client adhesive electrodes, an innovative heat dissipation system and an exclusive method of monitoring, control and independent modulation of all treatment process.

A targeted scientific experimentation confirmed widespread normalization and improvement of the tissue architecture as a whole.



Una tecnologia innovativa.

I trattamenti estetici con questa tecnologia portano ad agire su più livelli tra loro collegati ed interagenti:

- Ricostruzione di un terreno microcircolatorio regolare, con ottimizzazione della nutrizione del tessuto e dell'allontanamento di scorie metaboliche e tossine;
- Effetto pro-collagene, con ripristino dell'architettura tessutale e recupero dell'elasticità;
- Controllo dell'adipe localizzato, con aumento dell'attività metabolica tessutale e modellamento delle forme;.

Questa tecnologia si basa sull'**applicazione alternata e sequenziale di riscaldamento e di raffreddamento a livello dermico profondo ed ipodermico.**

Il riscaldamento viene indotto da radiofrequenza resistiva bipolare, applicata tramite speciali elettrodi pregellati mono-cliente specificatamente studiati per questa applicazione. Il raffreddamento viene generato tramite esclusivi sistemi termoelettrici a cella di Peltier.

An innovative technology.

The beauty treatments with this technology lead to acting on different levels connected and interacting:

- Reconstruction of a regular microcirculatory system, with optimization of tissue nutrition and removal of metabolic waste and toxins;
- Pro-collagen effect, with restoration of the tissue architecture and elasticity recovery;
- Control of localized fat, with increase of the tissue metabolic activity and shapes modelling;


This technology is based on **the alternate and sequential application of heating and cooling on deep dermal and hypodermal level.**

The heating is generated by bipolar resistive radiofrequency, applied by special pregelled single-client electrodes, specifically studied for this application. The cooling is generated by exclusive Peltier cell thermoelectrical systems.

SLIM UP® TOP CARD

Il transponder integrato nella consolle permette di riconoscere, lanciare e scalare dalla CARD il trattamento previsto.

The transponder inside the consolle automatically recognizes, starts and finally deletes from the CARD the right treatment.

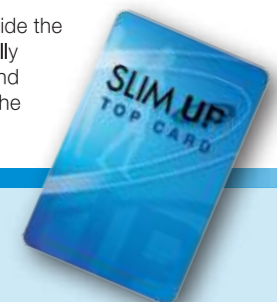

SLIM UP® ThermoBalance





Trattamenti Slim UP® Thermobalance.

I trattamenti con questa tecnologia prevedono varie fasi alternate di riscaldamento e raffreddamento della zona trattata senza la necessità di presenza costante dell'operatore; è sufficiente infatti, dopo aver posizionato le piastre nelle zone da trattare, effettuare una regolazione di intensità della RF, dopodiché l'apparecchio controlla autonomamente l'intensità erogata ed il raffreddamento secondo parametri preimpostati.

- **CELL:** per il trattamento degli inestetismi della cosiddetta cellulite, lavora con alternanza caldo e freddo rapida: ciò riattiva il microcircolo artero-venoso, il drenaggio veno-linfatico e spinge ad una riorganizzazione

dell'impalcatura cutanea e sottocutanea. Il trattamento si conclude con una fase di riscaldamento per eliminare tossine e metaboliti.

- **LIPO:** programma mirato all'eccesso di adipe localizzato. Punta principalmente all'aumento dell'attività metabolica locale. Il trattamento inizia con una fase dilatata di raffreddamento, che innalza rapidamente il metabolismo, per poi ripristinare un più corretto afflusso ematico.

- **SKIN TONE:** programma mirato ai trattamenti di perdita di tono cutaneo. La radiofrequenza mirata e profonda ottiene un visibile effetto "shrink" e stimola la neoproduzione di fibre collagene. La fase di raffreddamento addensa l'interstizio e lavora sull'architettura tessutale e sul corretto letto vascolare.

Slim UP® Thermobalance treatments.

The treatments with this technology provide for various alternate heating and cooling phases of the treated area without the need of constant operator presence; in fact, after positioning the plates in the area to be treated, it is enough to adjust the RF intensity, then, the device controls independently the emitted intensity and the cooling according to preset parameters.

- **CELL:** for the treatment of the so-called cellulite imperfections, it works with quick alternance of hot and cold; this reactivates the arterio-venous microcirculation, the venous-lymphatic drainage and pushes to a reorganisation of the cutaneous and subcutaneous structure. The treatment ends with a heating phase to eliminate toxins and metabolites.

- **LIPO:** program aimed to localized fat excess. It mainly focuses on local metabolic activity increase. The treatment starts with a dilated cooling phase, that quickly increases the metabolism, and then restore a more correct blood supply.

- **SKIN TONE:** program aimed to the treatments of skin tone loss. The targeted and deep radiofrequency allows a visible "shrink" effect and stimulates the new production of collagen fibres. The cooling phase thickens the interstitium and works on the tissue architecture and correct vascular bed.



Piastre di trattamento ThermoBalance (brevettate)

Le 6 piastre sono ingegnerizzate esclusivamente per la metodica Thermobalance. Liberare, controllare, modulare sia l'ipotermia che l'ipertermia richiede un sistema evoluto ed intelligente.

Il raffreddamento viene generato tramite sistemi termoelettrici a cella di Peltier e richiede un apposito e rilevante sistema di dissipazione del calore che necessita di materiali esclusivi e design innovativo: ciò rende le piastre un oggetto unico ed inconfondibile.

L'ipertermia da radiofrequenza passa attraverso speciali elettrodi monocliente pregellati, specificatamente studiati per questa applicazione. Gli elettrodi hanno una specifica forma che ottimizza le performance del trattamento e consentono un continuo monitoraggio della temperatura esattamente in corrispondenza della zona trattata; sono realizzati in materiali testati specificatamente per radiofrequenza modulabile.

ThermoBalance treatment plates (patented)

The 6 plates are engineered exclusively for the Thermobalance method. The release, the control and the modulation of both hypothermia and hyperthermia require an advanced and smart system.

The cooling effect is generated by Peltier cell thermoelectrical systems and requires a special and relevant system of heat dissipation. That leads to the application of exclusive materials and an innovative design: this makes the plates as a unique and unmistakable object.



The radiofrequency hyperthermia passes through special pregelled single-client electrodes, specifically studied for this application. The electrodes have a specific shape that optimizes the treatment performances and allows a continuous monitoring of the temperature exactly in the treated area; they are made of materials specifically tested for modulable radiofrequency.

Indicatore del trattamento attivo

Slim UP® Thermobalance è dotata di un segnale luminoso, posto sul retro della consolle, che indica in quale fase del trattamento ci si trova, quella di riscaldamento (se di colore rosso) o quella di raffreddamento (se di colore blu). Nelle normali fasi di stand-by dell'apparecchio mantiene invece una luce evanescente di colore bianco.

Active treatment phase signal

Slim UP® Thermobalance has a LED signal, on the back of the console, that shows to the user the active phase of the treatment ongoing: it lights red during the heating phases and blue during the cooling ones. When the unit is in stand-by, it emits a white evanescent light.

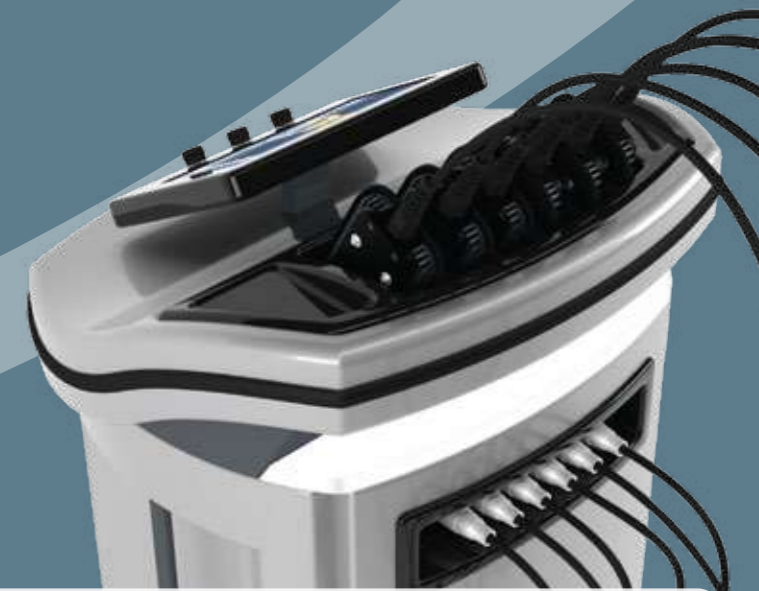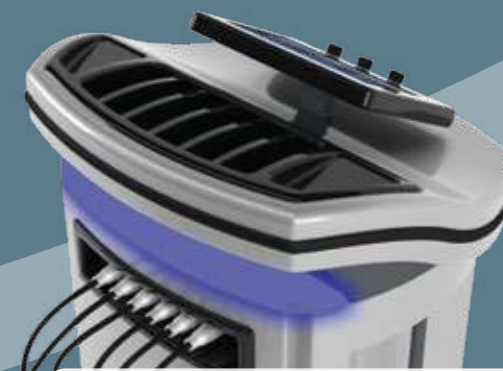

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione:	100-240 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza assorbita:	300 W
Apparecchio di classe I	
Parti applicate di tipo BF	
Apparecchio per funzionamento continuo	

General technical specifications

Input voltage:	100-240 V~
Main frequency:	50/60 Hz
Power consumption:	300 W
Electrical safety Class I	
Applied accessories type BF	
Continuous operating device	

SLIM UP® Thermobalance

SLIM UP[®] LIGHTER

C'è il rosa, colore della gioia e del relax, e il blu, simbolo della calma e della fiducia. C'è il giallo, segno di saggezza e calore, e il verde, espressione di armonia e di spirito. E poi ci sono i suoni. Suoni di mondi lontani e vicini, note profonde che arrivano all'anima. Mentre gli occhi toccano, il corpo ascolta. Un lettino, una macchina, e il miracolo si compie. Più che un miracolo, è l'estasi dei sensi. La musica allieta la mente, la macchina allieta il corpo. Ritrovare il benessere non è mai stato così facile. Ritrovare la bellezza non è mai stato così piacevole.

There are pink, the colour of joy and relax, and blue, which stands for calm and confidence. There are yellow, a symbol for wisdom and heat, and green, an expression of harmony and of spirit. There are also sounds. Sounds of far-away and near worlds, intense notes that come deep from the soul. While eyes perceive, the body listens. A couch, a machine, and a miracle takes place. Rather than a miracle, this is the ecstasy of the senses. Music enlivens the mind, the machine enlivens the body. Regaining wellness has never been so easy. Regaining beauty has never be so pleasant.

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione:	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza assorbita:	450 W
Potenza disponibile alle lampade:	400 W (n.4 lampade, 100 W cad.)
Apparecchio di classe I	
Apparecchio per funzionamento continuo	

General technical specifications

Input voltage:	230 V~
Main frequency:	50/60 Hz
Power consumption:	450 W
Available power for lamps:	400 W (for 4 lamps, 100 W each)
Electrical safety Class I	
Continuous operating device	



the future by

**SAUNA
ITALIA**®

DAM S.r.l.

Via del Lavoro, 6 - Zona Industriale Montaletto
48015 CERVIA (RA) - ITALY
Tel. +39 0544 965164 - Fax +39 0544 965159
info@saunaitalia.com
www.saunaitalia.com



DAM S.r.l.

È azienda certificata dall'ente accreditato TÜV Rheinland per il Sistema di Qualità secondo le norme: UNI EN ISO 9001:2015 - UNI CEI EN ISO 13485:2016

This company has a Quality System certified by the TÜV Rheinland accreditation body according to UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 13485:2016 standards

I singoli trattamenti possono essere sconsigliati in gravidanza, in presenza di talune patologie cardiache, in caso di turbe psichiche. Avvertenze e controindicazioni sono riportate sui manuali d'uso in dotazione ad ogni apparecchio. I manuali sono a disposizione della clientela prima dell'acquisto.

Certain treatments are not recommended during pregnancy, in presence of some heart diseases or psychiatric problems. Warning and contraindications are described in each appliance user manual. These manuals are also available for customer's consultation before purchasing.

SAUNA ITALIA si riserva la facoltà di modificare ogni prodotto senza preavviso - SAUNA ITALIA keeps the authority to modify each product without advanced notice.

SLIM UP TOP CENTER®

DIMAGRIMENTO · ESTETICA · BENESSERE