


SLIM UP STATION 2.0

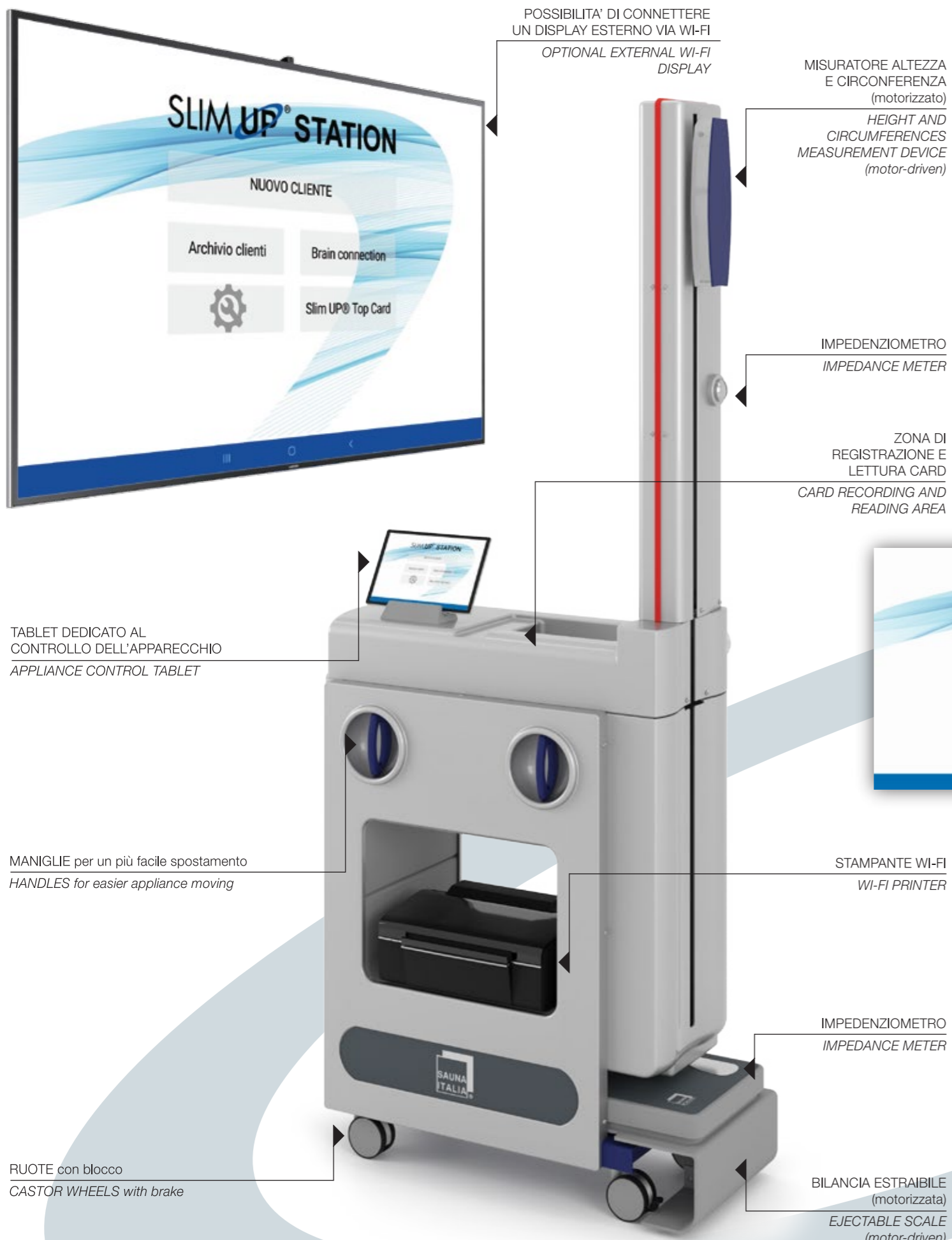

SLIM UP STATION 2.0 (brevettata) è un'apparecchiatura che vi aiuta ad accompagnare il cliente passo a passo, dall'accoglienza nel Centro alla realizzazione di un programma personalizzato di trattamenti che utilizzi le apparecchiature del vostro Slim UP TOP CENTER® 2.0 secondo le esigenze del cliente e le sue caratteristiche morfologiche, tutto per la sua massima soddisfazione.

Il programma personalizzato generato da Slim UP® STATION 2.0 tiene conto delle motivazioni fisiologiche e tecnologiche per cui sono state progettate le altre macchine: Slim UP® STATION 2.0 definisce quindi il ciclo di trattamenti più adatto al vostro cliente, offre la possibilità di registrarlo sulla Slim UP® TOP CARD e memorizza al proprio interno i dati del primo controllo e di quelli successivi, creando così un archivio dei clienti del Centro.

Slim UP® STATION 2.0 è assolutamente intuitiva e facile da utilizzare tramite la App dedicata su tablet di ultima generazione. Effettua tutte le misurazioni elettronicamente: altezza, circonferenze corporee e relativa altezza di misurazione, peso e impedenza. Le analizza, ricavandone la composizione corporea distinta tra grassi e percentuali di acqua cellulare ed extracellulare. Il tutto avviene automaticamente e tramite procedura guidata, evitando quindi ogni possibilità di errore.

Slim UP® STATION 2.0 (patented) is a device that helps you to take care of your customers step by step, from welcoming her/him in your Center to conceiving a custom-made program which exploits all your Slim UP TOP CENTER® 2.0 equipment, taking care of the customer's needs and of her/his morphological characteristics, everything to achieve her/his utmost satisfaction.

The custom-made program generated by Slim UP® STATION 2.0 takes into account the physiological and technical motivation that have led to the development of the other units: Slim UP® STATION 2.0 settles the best treatment cycle for your customer and gives you the opportunity to store it onto the Slim UP® TOP CARD, also keeping in memory all the data of the first customer's check-up as of the following ones, creating in that way your customer's archive.

Slim UP® STATION is really user-friendly and easy to use through its latest generation tablet and its dedicated App. The device electronically performs all the measurement: height, body circumferences and the height of their measurement, weight and impedance. It analyzes these data and it gives you the subject's body composition, distinguishing between fat mass, intra-cellular and extra-cellular water. Everything goes automatically and it follows a preset wizard, avoiding all possible mistakes.


- Come funziona la App:
- possibilità di creare un Nuovo Cliente e di consultare l'Archivio
 - area Impostazioni riservata al Centro Estetico, dove inserire i propri dati e i costi dei propri trattamenti
 - Brain Connection, per collegarsi direttamente con Sauna Italia
 - Slim UP® TOP CARD per gestire le CARD dei clienti e controllarne l'avanzamento nel ciclo e per registrare manualmente BONUS CARD

- How does the App works:
- New Customer registration and Customer Archive consultation
 - Setting area for the Beauty Center data and the treatment amount
 - Brain Connection, a way to directly connect to Sauna Italia
 - Slim UP® TOP CARD, to manage your customer's personal cards, watching the progress in their cycle, and to manually register BONUS CARD

SLIM UP TOP CARD

Slim UP® STATION 2.0 genera la TOP CARD. I trattamenti del ciclo vengono registrati sulla CARD personale del cliente e vengono automaticamente riconosciuti ed applicati dalle apparecchiature del vostro TOP CENTER. In ogni momento del ciclo, rileggendo la CARD è possibile sapere esattamente i trattamenti eseguiti e quelli ancora da eseguire.

Slim UP® STATION 2.0 generates the TOP CARD. The treatments of the cycle are registered on the personal customer's CARD: reading the CARD, each unit of your TOP CENTER will automatically detect and apply the right treatment. Reading a CARD during the cycle, you will know which treatment have been made and which ones are still to complete.

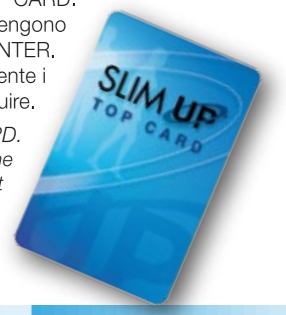


Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione:	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza assorbita:	400 W
Apparecchio di classe I	
Parti applicate di tipo BF	
Apparecchio per funzionamento continuo	

General technical specifications

Input voltage:	230 V~
Main frequency:	50/60 Hz
Power consumption:	400 W
Electrical safety Class I	
Applied accessories type BF	
Continuous operating device	



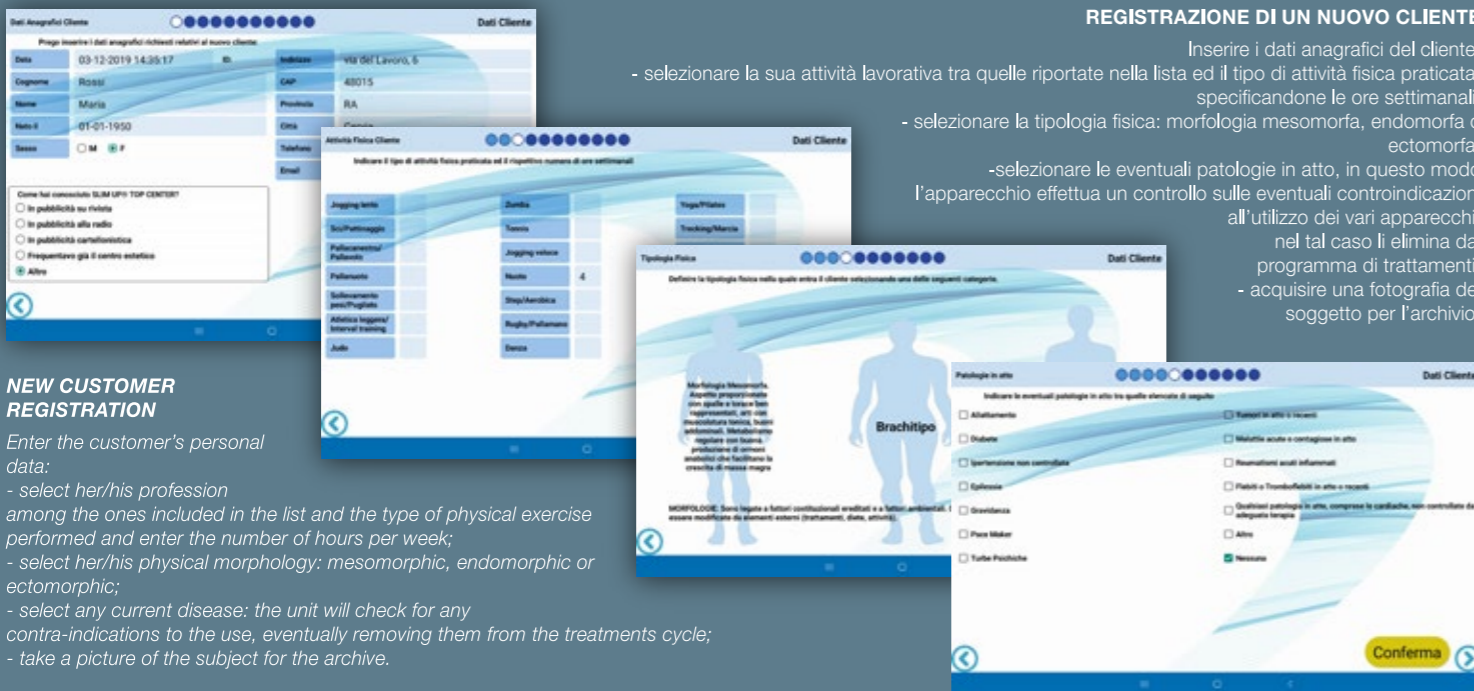

NEW CUSTOMER REGISTRATION

- Enter the customer's personal data:
- select her/his profession among the ones included in the list and the type of physical exercise performed and enter the number of hours per week;
 - select her/his physical morphology: mesomorphic, endomorphic or ectomorphic;
 - select any current disease: the unit will check for any contra-indications to the use, eventually removing them from the treatments cycle;
 - take a picture of the subject for the archive.

REGISTRAZIONE DI UN NUOVO CLIENTE

- Inserire i dati anagrafici del cliente:
- selezionare la sua attività lavorativa tra quelle riportate nella lista ed il tipo di attività fisica praticata, specificandone le ore settimanali;
 - selezionare la tipologia fisica: morfologia mesomorfa, endomorfa o ectomorfa;
 - selezionare le eventuali patologie in atto, in questo modo l'apparecchio effettua un controllo sulle eventuali controindicazioni all'utilizzo dei vari apparecchi, nel tal caso li elimina dal programma di trattamenti;
 - acquisire una fotografia del soggetto per l'archivio.



POSSIBILITA' DI SCELTA DEL PROGRAMMA

- **Slim UP your body** per definire un ciclo di trattamenti sulla base delle misurazioni del cliente;
- 4 programmi preset con specifiche caratteristiche
 - **beautify**, migliora compattezza e tono della pelle
 - **be-well**, per il benessere a tutto il corpo
 - **age-defy**, per combattere i segni dell'età
 - **be-active**, per aumentare il tono muscolare o riprendersi dall'attività intensa.

CHOOSING THE BEST WORKING PROGRAM

- **Slim UP your body**, to set a treatment cycle designed upon the customer's detailed measurement;
- 4 preset programs, each one with its specifics
 - **beautify**, to improve the tone and the firmness of skin
 - **be-well**, for whole body optimal well-being
 - **age-defy**, to fight the signs of aging
 - **be-active**, to increase muscle tone or recover after an intense workout

CICLO DI MISURAZIONI CLIENTE

- **ALTEZZA**: viene misurata facendo scendere l'altimetro fino a toccare la testa del cliente; l'apparecchio rileva il dato elettronicamente;
- **CIRCONFERENZE**: spalle, torace, vita, ventre, fianchi e coscia, utilizzando la fettuccia inserita nell'altimetro; l'apparecchio rileva elettronicamente i dati di circonferenza e altezza di misurazione;
- **PESO e IMPEDENZA**: rilevati elettronicamente attraverso la bilancia estraibile e i contatti metallici per mano e piede;
- **INestetismi**: selezionare nell'elenco gli eventuali inestetismi che presenta il cliente e la loro localizzazione.



CUSTOMER'S MEASURING CYCLE

- **HEIGHT**: it's taken lowering the bar until it touches the customer's head: the unit will detect the data electronically;
- **CIRCUMFERENCES**: shoulders, chest, waist, tummy hips and thighs, using the tape included in the meter: the unit will electronically detect the circumference and the height of the measurement;
- **WEIGHT and IMPEDANCE**: electronically detected by the sliding scale and the metal-plates for hand and foot;
- **BLEMISHES**: selecting out of the list any imperfection of the customer's body and its location.




INDICI CORPOREI

L'apparecchio elabora i dati rilevati e presenta, attraverso grafici e descrizioni, un quadro del cliente con valutazione di **peso ideale, massa magra e massa grassa**, valori di **idratazione corporea**, situazioni localizzate di **scostamento dalla silhouette ideale**.

BODY INDEXES

The unit analyses the customer's data and it provides descriptions and visual informations about **ideal weight, fat and fat-free mass, hydration and silhouette comparison** with the ideal values.

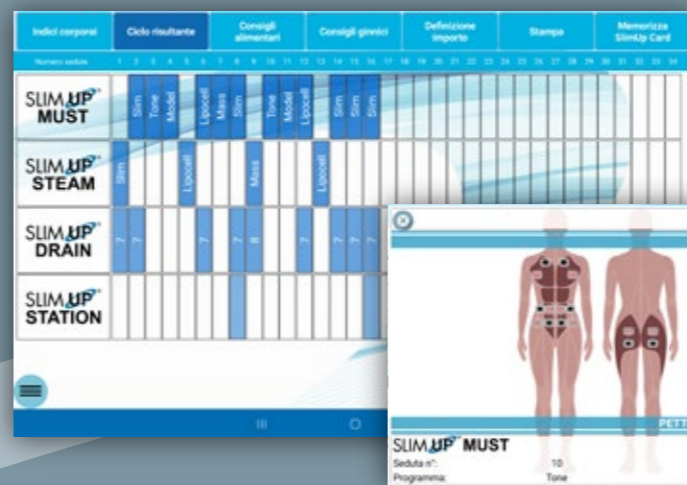

CICLO RISULTANTE

Viene elaborato il ciclo di trattamenti più idoneo alla situazione del cliente e mostrato attraverso la griglia delle sedute, con nome del trattamento e sequenza consigliata; per i trattamenti che utilizzano piastre o elettrodi viene presentato inoltre il corretto posizionamento sul corpo. Vengono anche indicati i controlli intermedi e finale di SlimUP STATION 2.0 e il momento giusto per effettuarli.

RESULTING CYCLE

The unit calculate the best treatment cycle for the customer's situation and shows it through a grid of sessions, with the best programs sequence; you can also watch the right placement of plates or electrodes for the treatments that need their applications. The cycle also shows you the intermediate and final controls of SlimUP STATION 2.0 and the right moment to carry out them.



SlimUP STATION 2.0 gives some general **EATING HINTS** (in case of necessity, the unit suggests the customer to follow a diet) and some **EXERCISES HINTS** to improve the tone where the customer needs, with pictures to better understand the suggested movements.

SlimUP STATION 2.0 defines the **TOTAL AMOUNT** of the cycle, depending on the costs of each single treatment you set up; there is also the possibility to choose a reduced cycle, with less sessions and a lower amount.

In the **PRINT** section, you can easily save, print or e-mail to your customer all the measurement taken, the analysis results, the amount of the treatment cycle, the eating and exercises hints.

SlimUP STATION 2.0 fornisce **CONSIGLI ALIMENTARI** di base (in caso di necessità rilevata dai parametri, viene consigliata una dieta) e **CONSIGLI GINNICI** mirati alla tonificazione delle zone in cui il cliente ha più necessità, visualizzati graficamente per una miglior comprensione.

SlimUP STATION 2.0 calcola automaticamente l'**IMPORTO DEL CICLO** di trattamenti sulla base dei costi da voi impostati per ogni apparecchiatura, con la possibilità di optare per una riduzione del numero di sedute e dell'importo totale.

Tramite la sezione **STAMPA**, tutte le misurazioni, i risultati dell'analisi, i costi e i consigli alimentari e ginnici possono essere comodamente salvati, stampati o inviati via e-mail al cliente.

ARCHIVIO CLIENTI.

In quest'area vengono registrati tutti i dati di ogni cliente: dati anagrafici, i vari set di misurazioni effettuate, sia per il primo check che per i successivi controlli, con i relativi indici corporei calcolati ed il ciclo di trattamenti previsto. Attraverso la lettura della TOP CARD è possibile richiamare automaticamente la scheda del cliente e visualizzare lo stato di avanzamento del suo ciclo di trattamenti.

CUSTOMER'S ARCHIVE.

Area dedicated to each customer's data storage: anagraphic data, set of measurement taken, both the first one and the following check-ups, body indexes and resulting cycle of treatments. Through the TOP CARD you can directly access to the customer's sheet and you can see the progress of the treatments cycle.

SLIMUP[®] STATION 2.0

